




Jak korzystać z iTOVi Face Scan

Witamy w iTOVi Face Scan!
Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą tą nową technologią, abyś Ty i Twój klient mogli korzystać z funkcji wspierających Waszą drogę do wellness!

Krok Pierwszy Zarejestruj się w iTOVi Face Scan

Nowy w iTOVi?
Pobierz aplikację iTOVi i wybierz Kup iTOVi Face Scan już dziś


Już zarejestrowany w Face Scan?
Przejdź do kroku drugiego

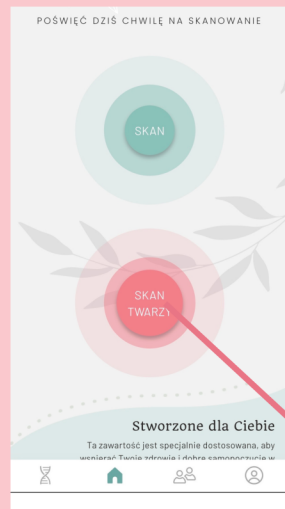

Kliknij Kup teraz, aby dodać subskrypcję Face Scan do nowego lub istniejącego konta iTOVi



Krok Drugi Otwórz Face Scan

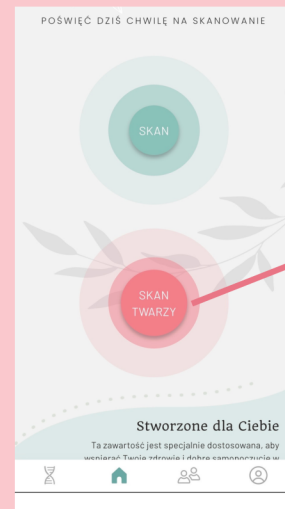


Wybierz, kogo chcesz zeskanować, lub utwórz nowego klienta do skanowania




Krok Trzeci Zgoda na skanowanie

Przeczytaj Zastrzeżenie dotyczące niemedycznego charakteru oraz Zastrzeżenie dotyczące udostępniania informacji, aby zrozumieć, że iTOVi Face Scan nie jest urządzeniem medycznym, nie stawia diagnoz ani nie zaleca leczenia żadnych schorzeń oraz aby zrozumieć, w jaki sposób iTOVi przetwarza, przechowuje i udostępnia dane uzyskane ze skanowania. Zaznacz oba pola, jeśli wyrażasz zgodę, a następnie będziesz mógł rozpocząć skanowanie, klikając przycisk Rozpocznij skanowanie.

Skanowanie rozpocznie się natychmiast po naciśnięciu przycisku Rozpocznij skanowanie

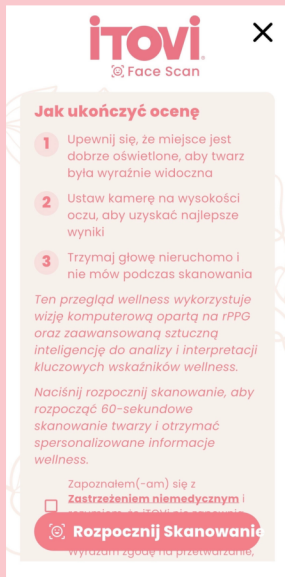

Krok Czwarty Rozpocznij skanowanie

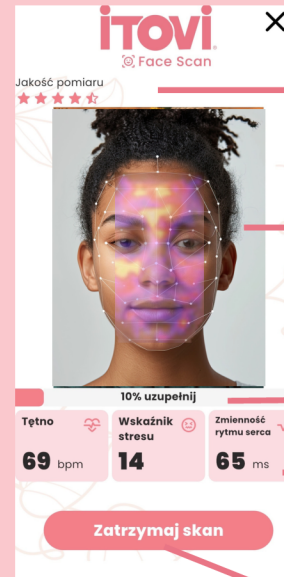

Podczas skanowania zobaczysz Jakość pomiaru przedstawioną w postaci gwiazdek w lewym górnym rogu – im więcej gwiazdek, tym lepiej. Jeśli jesteś zbyt blisko lub zbyt daleko od kamery, pojawi się komunikat z instrukcją ustawienia się w lepszej pozycji.


W miarę postępu skanowania zobaczysz pulsującą mapę termiczną wyświetlaną na Twojej twarzy, podczas gdy analizowane są wskaźniki wellness.

Pasek postępu pokazuje, jak daleko jesteś w trakcie skanowania.

Po kilku sekundach przez cały czas trwania skanowania będą wyświetlane dane na żywo dotyczące Tętna, Indeksu stresu oraz Zmienności rytmu serca.

Możesz zatrzymać skanowanie w dowolnym momencie przed jego zakończeniem.

Krok Piąty Skanowanie zakończone

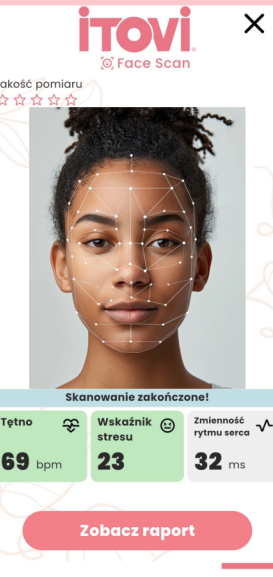

Kliknij Wyświetl raport, aby zobaczyć raporty Wellness i Produktów




Jak czytać raporty iTOVi Face Scan

ITOVI Face Scan oferuje dwa raporty, które wspierają Twoją drogę do wellness!


- Raport Wellness
- Raport a Produktack

Dostęp do raportów Face Scan

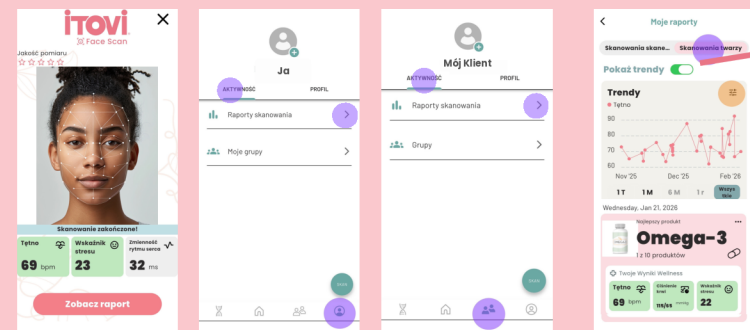

- Kliknij Wyświetl raport bezpośrednio po skanowaniu
- Kliknij ikonę Ja. W sekcji Aktywność kliknij Raporty skanowania
- Kliknij ikonę Klient. Wybierz klienta. W sekcji Aktywność kliknij Raporty skanowania
- Wybierz kartę Face Scans u góry, aby zobaczyć wszystkie wcześniejsze skany. Kliknij Face Scan, aby go otworzyć

Opcje trendów

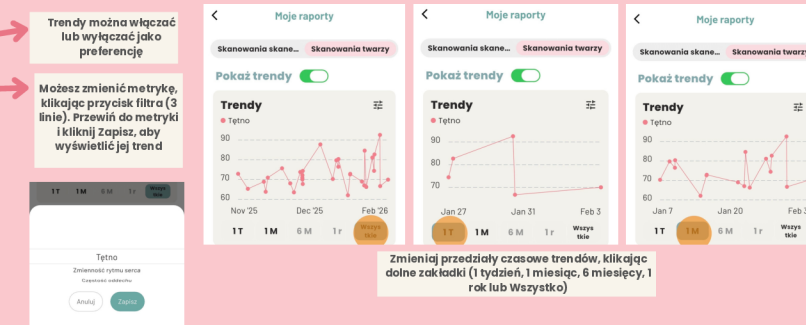

- Trendy można włączyć lub wyłączyć jako preferencje
- Możesz zmienić metrykę, klikając przycisk filtra (3 linie). Przewiń do metryki i kliknij zapisz, aby wyświetlić jej trend
- Zmieniaj przedziały czasowe trendów, klikając dolne zakładki (1 tydzień, 1 miesiąc, 6 miesięcy, 1 rok lub Wszystkie)

Raport Wellness

7 głównych metryk
Wyprowadzone bezpośrednio z skanu twarzy. Kliknij każdą metrykę, aby dowiedzieć się więcej

Uwaga: Czasami niektóre metryki mogą się nie pojawić. Może się tak zdarzyć, gdy jakość skanu lub dostępność danych nie jest wystarczająca do zapewnienia wiarygodnych informacji wellness.

5 metryk w dwóch górnych rzędach pokazuje wartość szacowaną po lewej stronie oraz zakres normalny po prawej.

Na dole wyświetlane są specjalizowane produkty dla tych metryk. Możesz kliknąć każdy produkt, aby otworzyć jego stronę i dowiedzieć się więcej.

PaAktywność przyśpóczulna i zmienność rytmu serca pokazują swoje wartości po lewej stronie. Nie istnieją „norma” dla tych metryk, ponieważ mogą się one znacznie różnić w zależności od osoby, wieku, płci i czynników indywidualnych. Obserwowanie trendów w czasie i łączenie wzorców ze zmianami w życiu to najlepszy sposób, aby określić, jaki poziom jest dla Ciebie idealny.

Ze względu na naturalne różnice między osobami nie są podane rekomendacje produktowe dla tych metryk.

Dodatkowe metryki

Te metryki są w dużej mierze oparte na danych wprowadzonych przez użytkownika w ankiecie. Wyniki i wskaźniki są obliczane przez algorytm wellness iTOVi, aby dostarczyć dodatkowych informacji. Otwórz każdą podsekcję, aby zobaczyć poszczególne kategorie. Kliknij Otwórz ankietę, aby wprowadzić więcej informacji.

- Podsumowanie wellness
- Przebieg wellness układu sercowo-naczyniowego
- Wiek dobrotanu naczyniowego
- Wynik dobrotanu sercowo-naczyniowego
- Wynik wiitalności sercowo-naczyniowej
- Wskaznik dobrotanu wątroby
- Raport o produktach

Wynik Wellness

Wyprowadzony bezpośrednio z danych skanu twarzy i algorytmu wyniku wellness.

Ankieta

Dodanie większej ilości informacji pozwala na uzyskanie głębszych analiz w czterech dolnych sekcjach i ich podkategoriach. Możesz wrócić do ankiety w dowolnym momencie, aby zaktualizować swoje odpowiedzi.

Uwaga: Im więcej informacji podasz w ankiecie, tym więcej metryk może zostać obliczonych. Niektóre metryki nie zostaną obliczone bez wszystkich wymaganych danych.

Punkcja dodatkowych metryk

- Stosowane są dwa systemy punktacji.
- Skalowana punktacja od 0 do 100
- Dopasowania: Niskie, Umiarkowane lub Silne

Wyniki ogólne są ważonymi kombinacjami wyników częstotkowych.

ITOVI Face Scan jest funkcją wellness i nie stanowi urządzenia medycznego ani usługi medycznej. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wykrywania ani zapobiegania chorobom lub zaburzeniom. Użycie danych metryki i informacji o skąd wyliczenia ogólnym celem wellness i informacyjnym i nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy ani leczenia. ITOVI Face Scan nie dostarcza opinii medycznych ani ocen klinicznych. Jeśli masz jakikolwiek objawy zdrowotne, objawy lub uwaga, że możesz doświadczać nagłego stanu zagrożenia zdrowia, niezwłocznie skontaktuj się z wywołującym pomoc medyczną służby ratunkowe. Zawsze skonsultuj się z zaangażowanym pracownikiem i skłóć zdrowia przed podjęciem jakichkolwiek decyzji zdrowotnych na podstawie informacji dostarczonych przez tę aplikację.



Jak czytać raporty iTOVi Face Scan


Dostęp do raportu produktów



Możesz kliknąć górne menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do każdego raportu. Kliknij raport, który chcesz otworzyć

Możesz kliknąć dolne okno podglądu, aby otworzyć raport produktów

Udostępnianie raportów

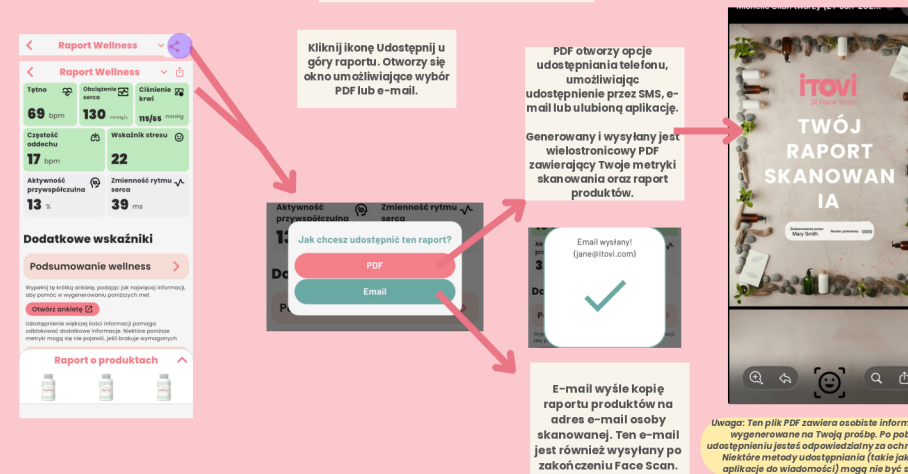


Kliknij ikonę Udostępnij u góry raportu. Otworzy się okno umożliwiające wybór PDF lub e-mail.

PDF otworzy opcje udostępnienia telefonu, umożliwiające udostępnienie przez SMS, e-mail lub ulubioną aplikację. Generowany i wysłany jest wielostronicowy PDF zawierający Twoje metryki skanowania oraz raport produktów.

E-mail wyśle kopię raportu produktów na adres e-mail osoby skanowanej. Ten e-mail jest również wysyłany po zakończeniu Face Scan.

Uwaga: Ten plik PDF zawiera osobiste informacje wellness wygenerowane na Twoją prośbę. Po pobraniu lub udostępnieniu jesteś odpowiedzialny za ochronę tego pliku. Niektóre metody udostępniania (takie jak e-mail lub aplikacja do wiadomości) mogą nie być używane.

Filtrowanie raportów

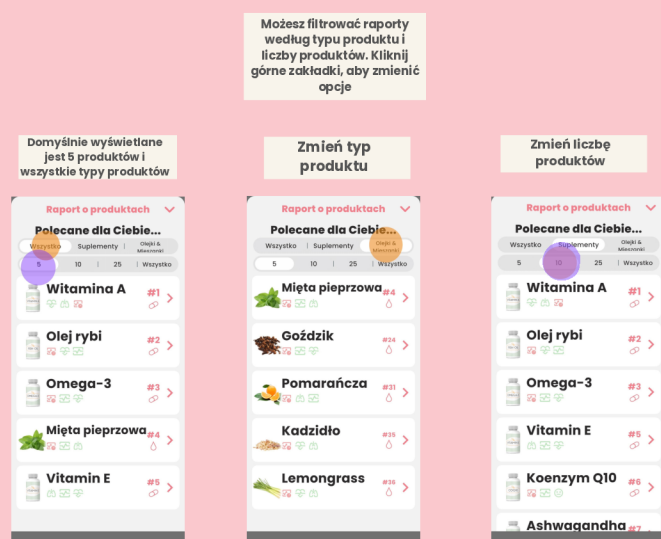


Możesz filtrować raporty według typu produktu i liczby produktów. Kliknij górne zakładki, aby zmienić opcje

Domyślnie wyświetlane jest 5 produktów i wszystkie typy produktów

Zmień typ produktu

Zmień liczbę produktów

Raport o Produktach

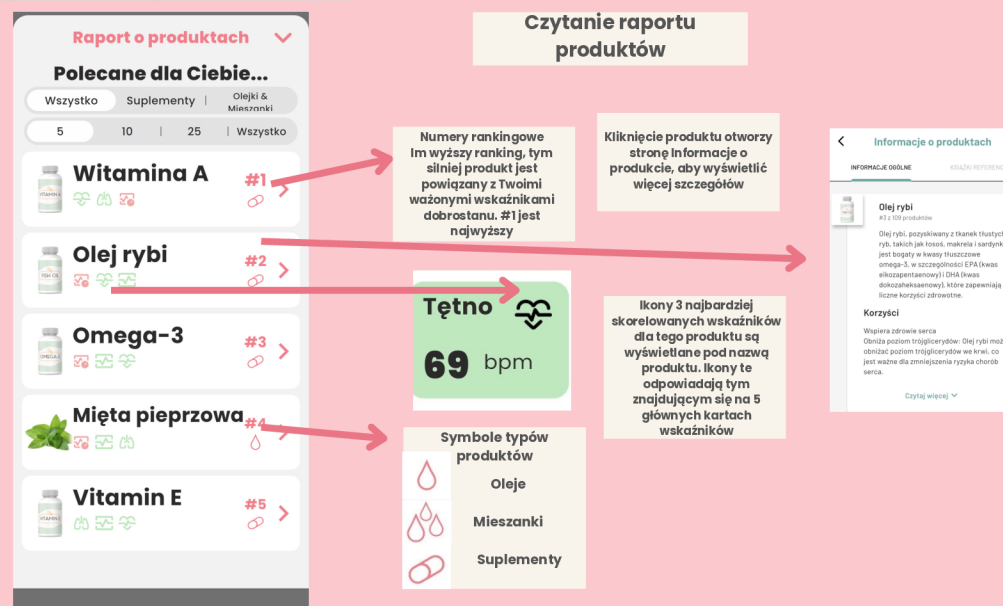

Czytanie raportu produktów

Numer rankingowy i wyższy ranking, tym silniej produkt jest powiązany z Twoimi ważnymi wskaźnikami dostrastu. #1 jest najwyższy

Kliknij cie produktu otwory stronę informację o produkcie, aby wyświetlić więcej szczegółów

Ikonki 3 najbardziej skorelowanych wskaźników dla tego produktu są wyświetlane pod nazwą produktu. Ikonki te odpowiadają tym znajdującym się na 5 głównych kartach wskaźników

Symbole typów produktów

 Ojele

 Mieszanki

 Suplementy