Az iTOVi Arcfelismerési Szkennelés használata


Üdvözöljük az iTOVi Arcfelismerési Szkennelés! Örömmel osztjuk meg Önnel ezt a technológiát, hogy Ön és ügyfelei is használhassák a wellness útjukon.


1 Regisztráció az iTOVi Face Scanre

Új az iTOVi-nál? Töltse le az iTOVi alkalmazást, és koppintson a Vásárolja meg az iTOVi Face Scan-t meg ma gombra.

A **Vásároljon Most** gombbal Face Scan előfizetést adhat egy új vagy meglévő iTOVi fiókhoz.

Már regisztrált? Ugorjon a 2. lépésre.

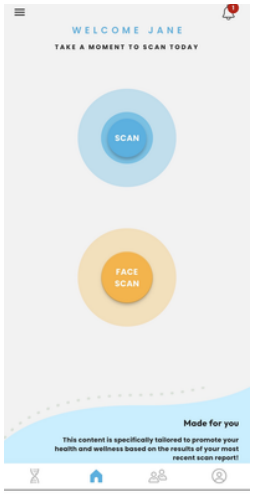


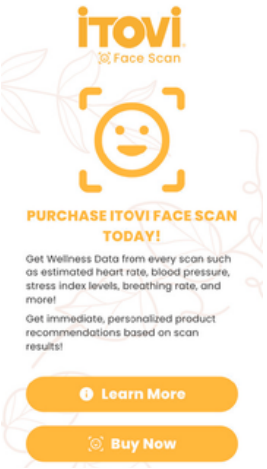

2 A Arcfelismerési Szkennelés megnyitása

A kezdőképernyőn koppintson a Arcfelismerési Szkennelés gombra.


Ezután válassza ki, kit szkennel: saját magát, egy ügyfelet a kapcsolatlistából, egy új ügyfelet, vagy állítson be egy Távoli szkennelés.

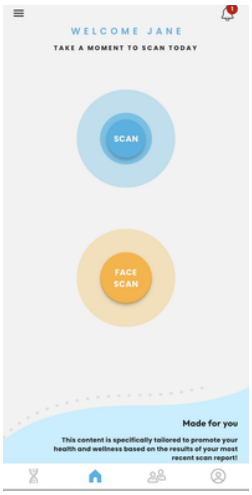




3 Fókuszterületek

Válasszon 1 vagy 2 területet, amelyre a termékek összpontosítsanak, majd koppintson a Folytatás gombra.

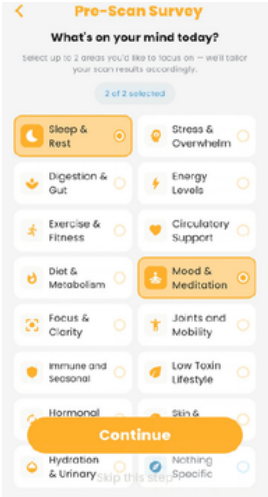

A Arcfelismerési Szkennelés elvégzése


4 Hozzájárulás

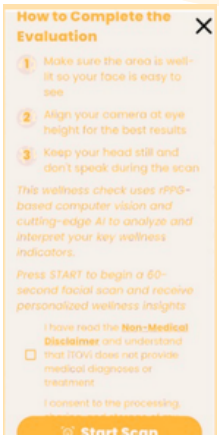

Olvassa el a nem orvosi felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot és az tájékoztató az adatok megosztásáról szövegét. Ezek elmagyarázzák, hogy az iTOVi Face Scan nem orvostechnikai eszköz, nem diagnosztizál és nem javasol kezelést, valamint azt, hogyan kezeli, tárolja és osztja meg az iTOVi a szkennelési adatait.

Ha egyetért, jelölje be mindkét négyzetet, majd koppintson a Szkennelés Inditása gombra. A szkennelés azonnal elindul.

5 A szkennelés közben

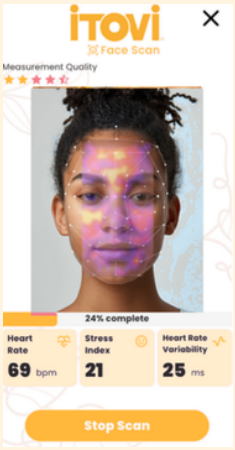

Mérési minőség
A bal felső csillagok a szkennelés minőségét mutatják. Minél több, annál jobb. Ha túl közel vagy túl messze van a kamerától, egy üzenet jelzi, merre mozduljon.


Hőtérkép
Lüktető hőtérkép jelenik meg az arcán, miközben a szkennelés gyűjti a wellness értékeit.

Folyamatjelző
Megmutatja, hol tart a szkennelés.

Élő értékek
Néhány másodperc után megjelenik a pulzus, a stresszindex és a pulzusvariabilitás, és a szkennelés végéig frissül.

A szkennelést bármikor leállíthatja, mielőtt befejeződne.

6 Kész a szkennelés

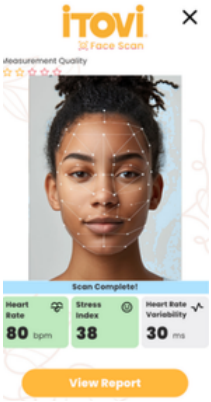

A végén a szkennelést befejez felirat és az eredményei jelennek meg.

Koppintson a jelentés megtekintése gombra a Jóllét-, Termékek- és Protokolljelentés megtekintéséhez.


A Arcfelismerési Szkennelés jelentések megkeresése

Minden Face Scanhez tartozik egy jóllétjelentés és egy Termékjelentés, valamint egy Protokolljelentés (8. és 9. oldal).

A JELENTÉSEK MEGKERESÉSE


Közvetlenül a szkennelés után

Koppintson a jelentés megtekintése gombra.

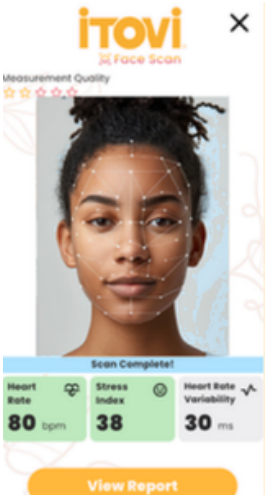


Saját jelentések

Koppintson a Magam ikonra, majd az Aktivitás alatt a Skennelési jelentés pontra.

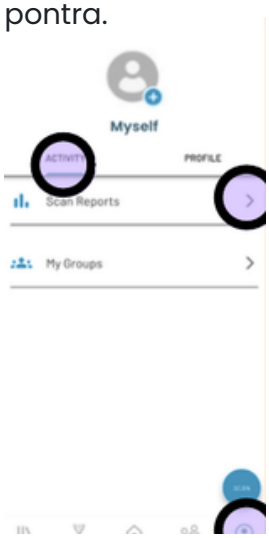

Egy ügyfél jelentései

Koppintson a ügyfélek ikonra, válassza ki az ügyfelet, majd az Aktivitás alatt a Skennelési jelentés pontra.

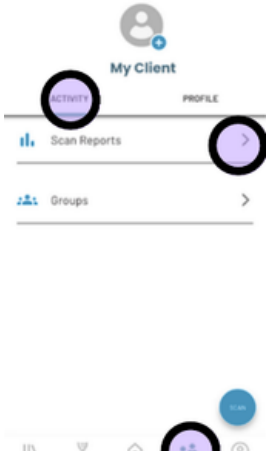

Minden korábbi Arcszkennelés


Koppintson felül a Arcszkennelés fülre, majd egy szkennelésre a megnyitásához.



TRENDBEÁLLÍTÁSOK


Trendek be- és kikapcsolása

A Trendek Megjelenítése kapcsolóval.

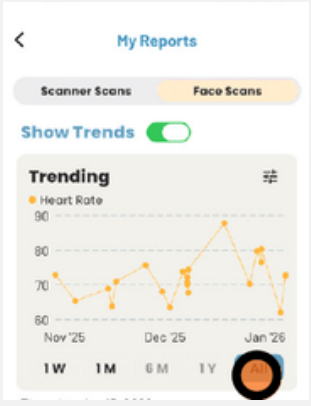


Az érték módosítása

Koppintson a szűrő gombra (három vonal), görgessen egy értékhez, és koppintson a Mentés gombra.

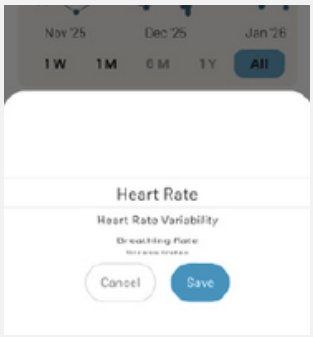


Az időszak módosítása

Koppintson alul az 1W, 1M, 6M, 1Y vagy Minden lehetőségre.

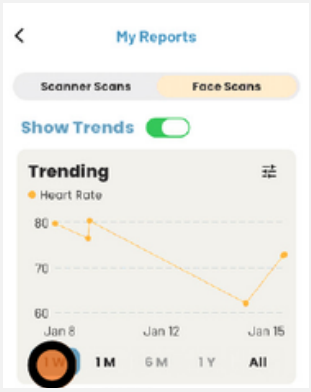


A Wellnessjelentés olvasása

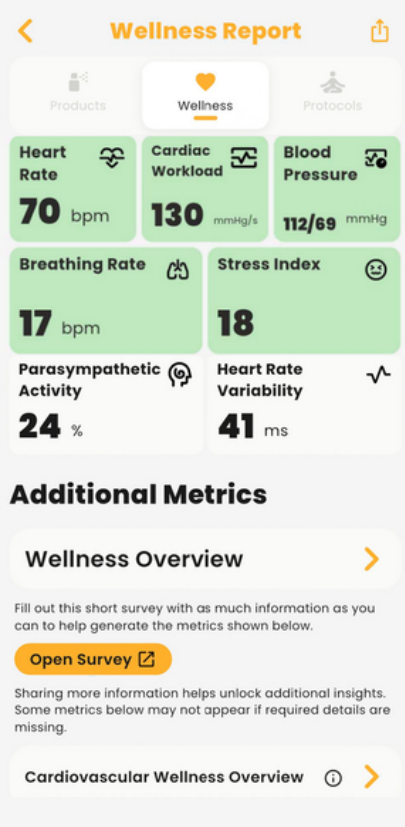

7 fő érték

Ezek közvetlenül a Face Scanből származnak. Koppintson egy értékre a részletekért.

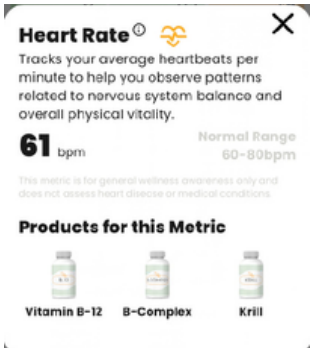

Az első öt

Bal oldalt a becsült érték, jobb oldalt a normál tartomány látható. A kis i gombbal bővebb információt kaphat az értékről. Alul az adott értékhez Önnek választott termékek vannak. Koppintson egyre a termékoldal megnyitásához.



Paraszimpatikus aktivitás és pulzusvariabilitás

Ezek csak a mért értéket mutatják. Nincs normál tartomány, mert életkortól, nemtől és más tényezőktől függően emberenként nagyon eltérnek. A legjobb, ha idővel követi a trendjét, hogy lássa, mi a jellemző Önre, ezért ehhez a kettőhöz nincs termékajánlás.

Megjegyzés: Előfordul, hogy egy érték nem jelenik meg. Ez akkor fordulhat elő, ha a szkennelés minősége vagy a rendelkezésre álló adat nem elég egy megbízható wellness eredményhez.


Az iTOVi Face Scan wellness funkció, nem orvostechnikai eszköz vagy egészségügyi szolgáltatás. Nem szolgál semmilyen betegség vagy egészségi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. A megadott értékek és információk kizárólag általános wellness és tájékoztató célt szolgálnak, és nem helyettesítik a szakszerű orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Az iTOVi Face Scan nem ad orvosi véleményt vagy klinikai értékelést. Ha egészségügyi aggodalmai vagy tünetei vannak, vagy úgy gondolja, hogy orvosi vészhelyzet áll fenn, azonnal forduljon képzett egészségügyi szakemberhez. Mielőtt az alkalmazás adatai alapján egészségügyi döntést hozna, mindig konzultáljon engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval.


További értékek és jóllét pontszám


További értékek

Ezek főként a kérdőívben megadott adatokon alapulnak. Az iTOVi wellness algoritmusai ezekből számolnak pontszámokat és mutatókat.

Nyissa meg az egyes részeket a kategóriákért, és koppintson az kérdőív megnyitása gombra további adatok megadásához.

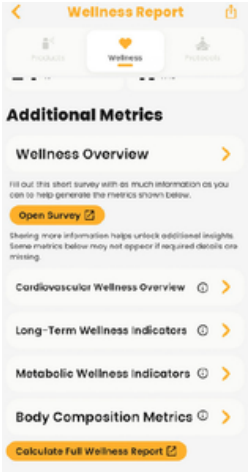

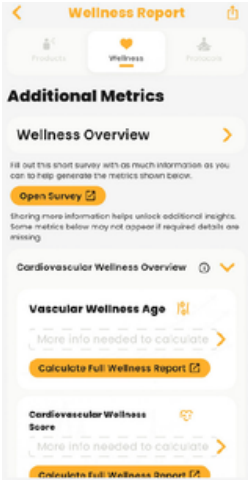

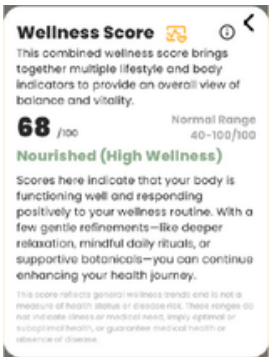

Wellness pontszám

A Arcfelismerési Szkennelés adataiból számolva, az iTOVi wellness pontszám-algoritmusával.



A kérdőív


Minél többet ad meg, annál több eredmény jelenik meg a négy alsó részben. Válaszait bármikor módosíthatja.


A TOVÁBBI ÉRTÉKEK PONTOZÁSA

Kétféle pontozás van: egy 0-tól 100-ig terjedő skála és egy Alacsony, Közepes vagy Erős besorolás.

Az összesített pontszámok a részpontszámok súlyozott kombinációi.

Egyes értékek csak akkor számolódnak, ha minden szükséges adatot megadott a kérdőívben.

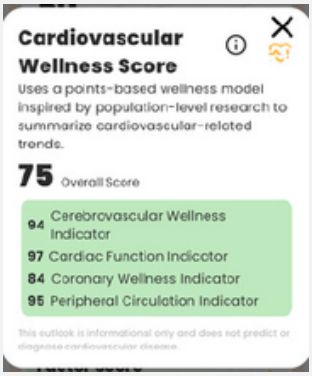


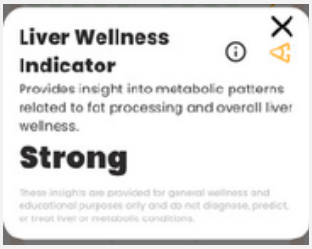


A Termékjelentés


A Termékjelentés megnyitása

Koppintson a jelentés tetején a menükártyára a jelentések közti váltáshoz, majd a megnyitni kívántra.

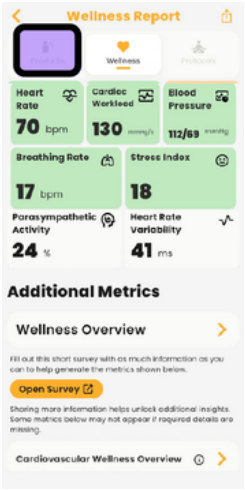

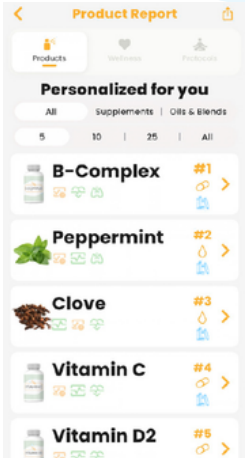

A TERMÉKJELENTÉS OLVASÁSA

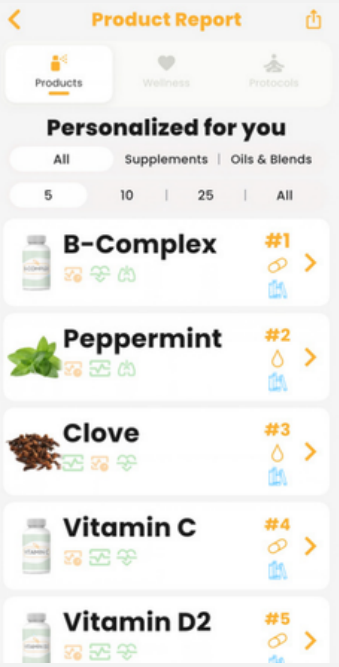

Helyezési számok

Minél magasabb a helyezés, annál jobban illik a termék a súlyozott wellness értékeihez. A #1 illik a legjobban.

Érték ikonok


A termékhez leginkább kapcsolódó három érték ikonja a termék neve alatt látható. Ezek megegyeznek az öt fő értékkártya ikonjaival.


Terméktípus jelek

Megmutatják, hogy a termék olaj, keverék vagy étrend-kiegészítő.

Termékinformációk

Koppintson egy termékre a termékbetekintések oldal megnyitásához.

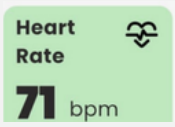

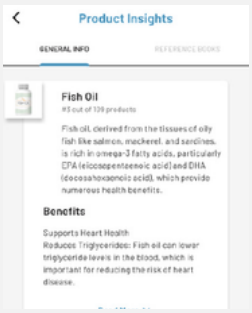


A jelentések szűrése és megosztása

A JELENTÉS SZŰRÉSE

Koppintson felül a fülekre a terméktípus és a termékek száma szerinti szűréshez.


Alapnézet

5 termék, minden típusból.

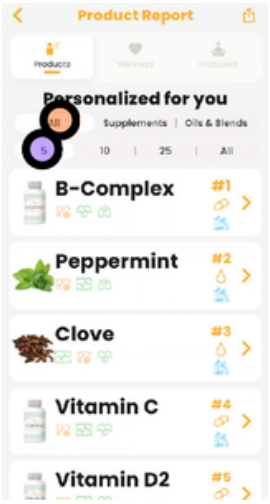


Terméktípus módosítása

Minden, kiegészítők vagy esszenciák & keverékek.

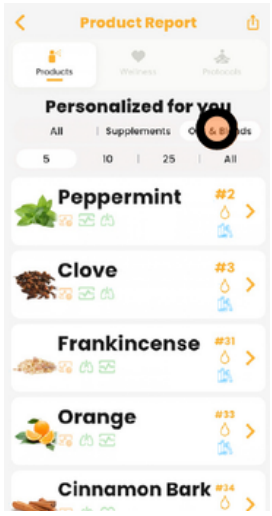

A szám módosítása

5, 10, 25 vagy Minden.

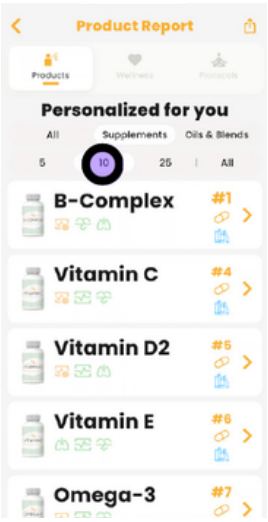

A JELENTÉSEK MEGOSZTÁSA

Koppintson a jelentés tetején a megosztása jelre, majd válassza a PDF vagy az e-mail lehetőséget.



PDF

Megnyitja a telefon megosztási lehetőségeit, így SMS-ben, e-mailben vagy más alkalmazással küldheti el. Többoldalas PDF a szkennelési értékekkel és a Termékjelentéssel.



E-mail

A Termékjelentés másolatát elküldi a szkennelt személy e-mail-címére. Ez az e-mail a Face Scan befejezésekor automatikusan is kimegy.


Megjegyzés: Ez a PDF az Ön kérésére készült személyes wellness adatokat tartalmaz. Letöltés vagy megosztás után Ön felel a védelméért. Egyes megosztási módok, például az e-mail vagy az üzenetküldők, nem feltétlenül titkosítottak.

A Protokolljelentés

1 Legfeljebb két fókusztéma


A szkennelés előtt válasszon legfeljebb két fókusztémát. Nem tudja, hol kezdje? Válassza a Semmi Konkrét lehetőséget, és a Face Scan irányítja az ajánlásokat.

Ezután szkenneljen a szokásos módon. Ha kész az eredmény, nyissa meg a jelentéseket. Jobbra fent megjelenik a **Protokollok** fül a Products és a jóllét mellett.

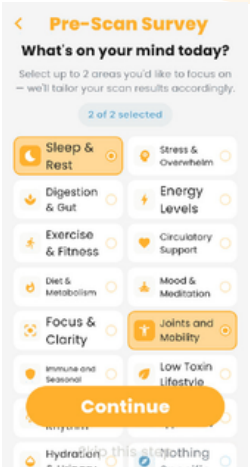


2 A Protocollok fül megnyitása

Itt láthatja azt az egy-három protokollt, amely a következő 30 napra Önhöz illik. A nevük alatt látszik, hány termék tartozik hozzájuk.

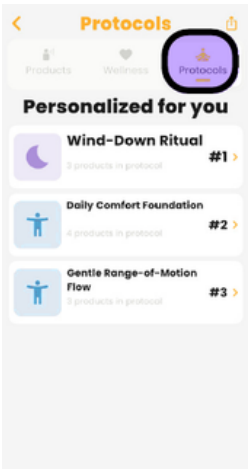

3 Egy protokoll megnyitása


Koppintson egy protokollra az oldala megnyitásához, ahol az előnyöket és a 30 napos, lépésenkénti útmutatót találja. A több megjelenítése gombbal mindent elolvashat.

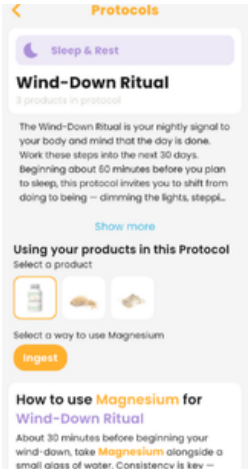

A protokollok használata


4 Válasszon terméket

Minden protokolloldal alján, a A termékeid használata ebben a Protokollban résznél válasszon egy termékképet.

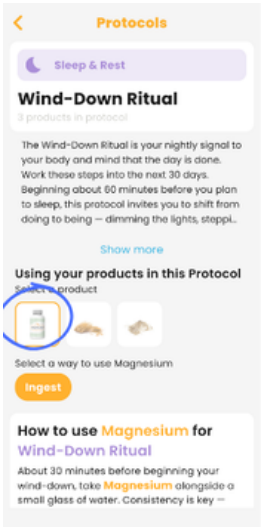


5 Válassza ki a használat módját


Egy használati gombbal választhat olyan lehetőséget, mint Belsőleges, a Diffúzió, a Külsőleges, a Általános és az Légtisztítás. Csak az adott termékhez illő módok jelennek meg.

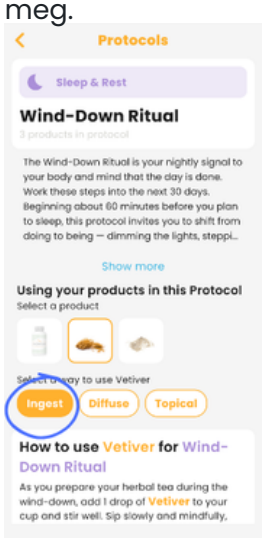

6 Kövesse az útmutatót

A mód kiválasztása után lépésenkénti útmutató jelenik meg, gyakran kiegészítő termékjavaslatokkal.

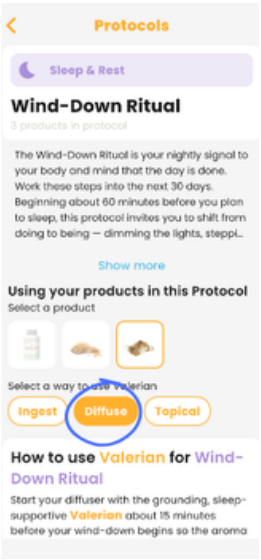

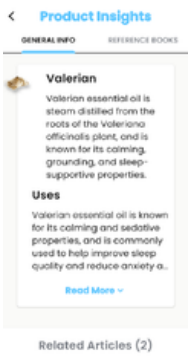

Tipp: Koppintson egy termék nevére a részletekért, ha elérhető, árral és linkekkel.

TANÁCSUNK

Kísérletezzen a 30 nap alatt. Próbálja ki a különféle termékeket és használati módokat, és találja meg, mi illik Önhöz és az életmódjához. A wellness útja az Öné, az iTOVi Protocols pedig segít az úton.

Copyright © 2018-2026 iTOVi, LLC

Ezek a termékek nem utalnak egészségi állapotra, és nem szolgálnak betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Ha kérdése van saját vagy mások egészségével, az iTOVi biztonságos használatával vagy az iTOVi jelentésben szereplő termékekkel kapcsolatban, forduljon orvosához vagy egészségügyi szolgáltatójához.