iTOVi 顔スキャンの使い方


iTOVi 顔スキャンへようこそ！この技術をお届けできることをうれしく思います。あなたとお客様のウェルネスの歩みにお役立てください。


1 iTOVi顔スキャンに登録

iTOViは初めてですか？iTOViアプリをダウンロードし、今すぐ ITOVI FACE SCAN を購入しましょう！ をタップします。

今買うをタップすると、新規または既存のiTOViアカウントに顔スキャンのサブスクリプションを追加できます。

登録済みの方は、ステップ2へ。

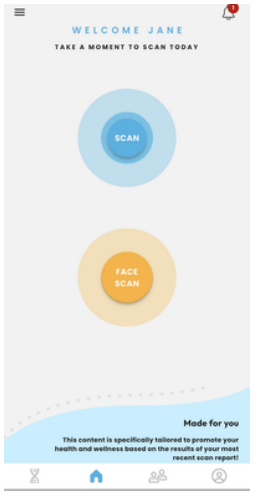


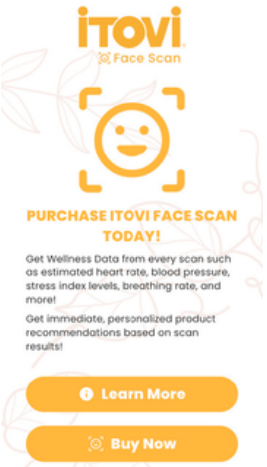

2 顔スキャンを開く

ホーム画面で顔スキャンをタップします。


次に、スキャンする人を選びます：ご自身、連絡先リストのお客様、新しいお客様、またはリモートスキャンの設定。

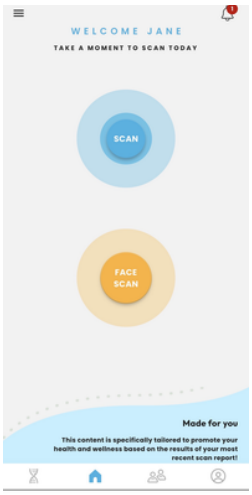




3 重点分野を選ぶ

製品で重視したい分野を1つか2つ選び、継続するをタップします。

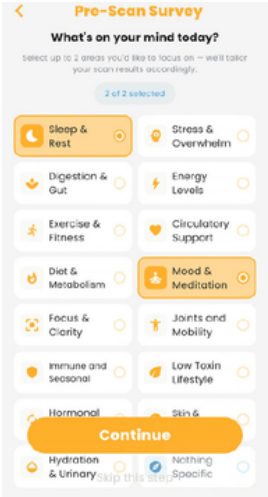

顔スキャンを行う


4 スキャンへの同意

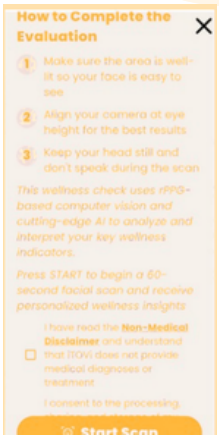

非医療免責事項と情報共有に関する免責事項をお読みください。iTOVi 顔スキャンは医療機器ではなく、病気の診断や治療の推奨を行わないこと、そしてiTOViがスキャンデータをどのように処理・保存・共有するかを説明しています。

同意する場合は両方のボックスにチェックを入れ、スキャン開始をタップします。スキャンはすぐに始まります。

5 スキャン中

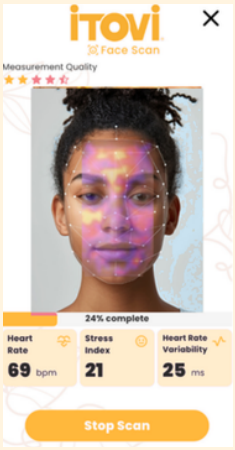

測定品質
左上の星はスキャンの品質を表します。星が多いほど良好です。カメラに近すぎたり遠すぎたりすると、動き方を知らせるメッセージが出ます。

進行状況バー
スキャンの進み具合を示します。


サーマルマップ
スキャンがウェルネス値を集める間、顔に脈打つサーマルマップが表示されます。

リアルタイムの値
数秒後に心拍数、ストレス指数、心拍変動が表示され、スキャン終了まで更新されます。

スキャンは終了前にいつでも止められます。

6 スキャン完了

スキャンが終わると、結果とともにスキャン完了と表示されます。

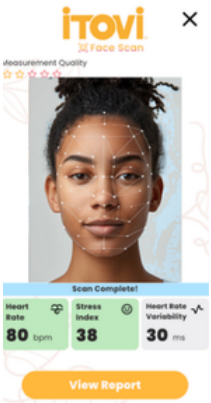

レポートを見るをタップすると、ウェルネス・製品・プロトコルのレポートを見られます。


顔スキャンレポートの見つけ方

すべての顔スキャンは、ウェルネスレポートと製品レポート、さらにプロトコルレポート（8・9ページ）があります。

レポートの見つけ方


スキャン直後

レポートを見るをタップします。

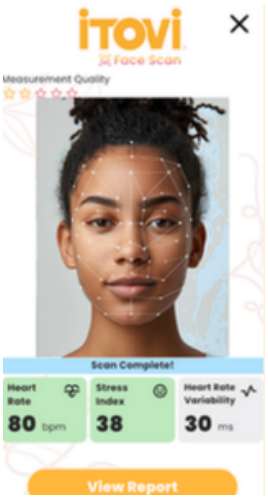


ご自身のレポート

自分自身アイコンをタップし、活動のスキンレポートをタップします。

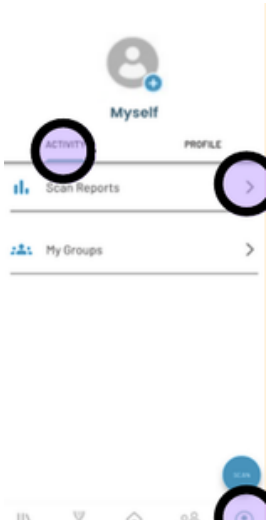


お客様のレポート

クライアントアイコンをタップしてお客様を選び、活動のスキャンレポートをタップします。

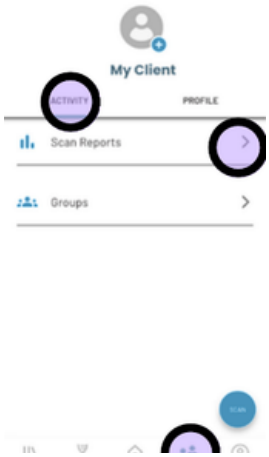

過去のすべての顔スキャン


上部の顔スキャンタブをタップし、開きたいスキャンをタップします。

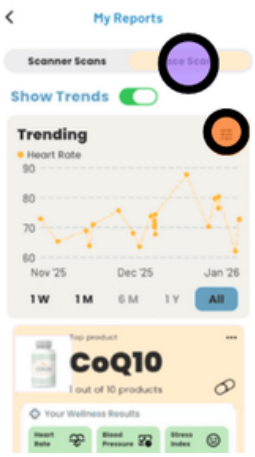

トレンドの設定


トレンドのオン・オフ

トレンドを表示スイッチを使います。

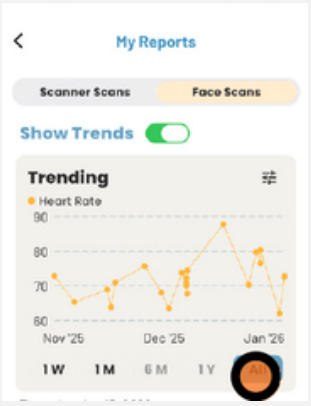


指標を変える

フィルターボタン（三本線）をタップし、指標までスクロールして貯める**(保存)**をタップします。

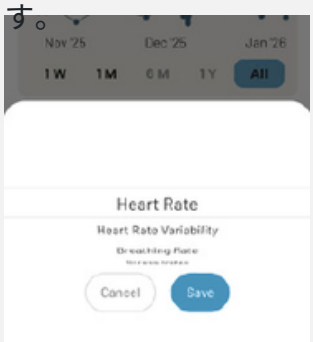


期間を変える

下部の1W、1M、6M、1Y、Allをタップします。

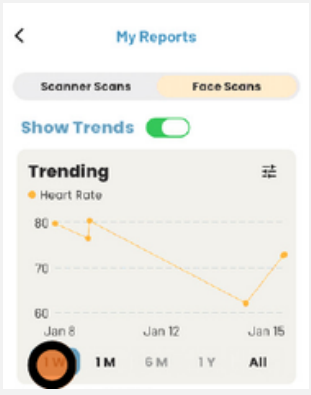


ウェルネスレポートの見方

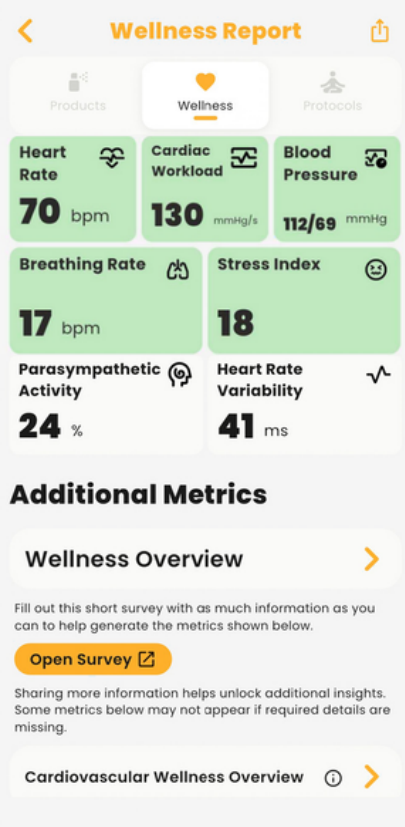

7つの主要指標

顔スキャンから直接得られる値です。指標をタップすると詳しく見られます。

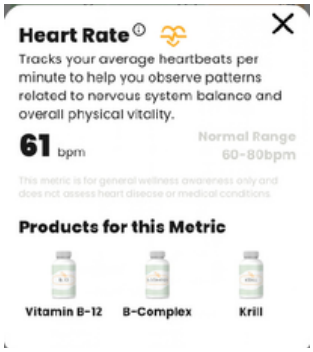

上位5つ

左に推定値、右に正常範囲が表示されます。小さな「i」ボタンをタップすると、指標の詳しい情報を見られます。下にはその指標に合わせて選ばれた製品があります。タップすると製品ページが開きます。



副交感神経活動と心拍変動

これらは測定値のみを表示します。年齢や性別などの要因で個人差が大きいため、正常範囲はありません。時間の経過とともに傾向を見るのが、ご自身にとっての普段の値を知る一番の方法です。そのため、この2つには製品の推奨はありません。

注：指標が表示されないことがあります。スキャンの品質やデータが、信頼できる結果を出すのに足りない場合に起こります。


iTOVi Face Scanはウェルネス機能であり、医療機器や医療サービスではありません。いかなる病気や健康状態の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。提供される値や情報は一般的なウェルネスと情報提供のみを目的としており、専門家による医学的助言、診断、治療に代わるものではありません。iTOVi Face Scanは医学的意見や臨床評価を提供しません。健康上の不安や症状がある場合、または緊急の医療状態の可能性があると思われる場合は、すぐに資格のある医療専門家にご相談ください。このアプリの情報に基づいて健康に関する判断をする前に、必ず資格のある医療提供者にご相談ください。


追加指標とウェルネススコア


追加指標

主にアンケートの入力内容から算出されます。iTOViのウェルネスアルゴリズムが回答からスコアや指標を計算します。

各セクションを開くとカテゴリーが表示されます。**Oアンケートを開く**をタップして情報を追加できます。

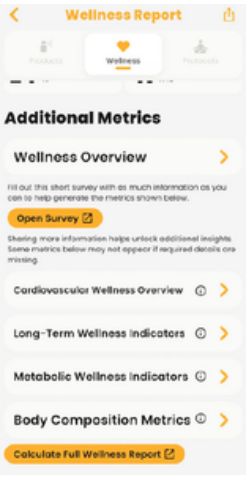

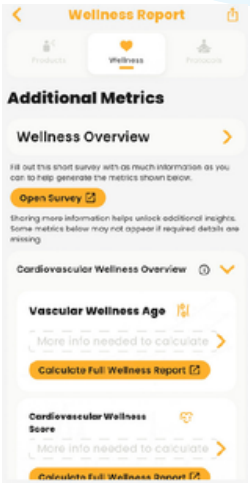

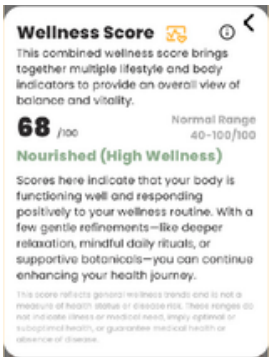

ウェルネススコア

顔スキャンのデータからiTOViのウェルネススコアアルゴリズムで算出されます。



アンケート


入力が多いほど、下の4つのセクションに表示される情報が増えます。回答はいつでも更新できます。


追加指標の評価方法

評価は2種類です：0〜100のスケールと、低・中・強の評価。

総合スコアは各サブスコアの加重平均です。

必要な情報をすべてアンケートに入力するまで、計算されない指標もあります。

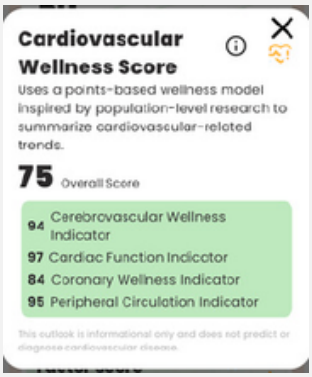


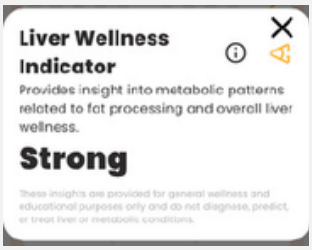


製品レポート


製品レポートを開く

レポート上部のメニューカードをタップしてレポートを切り替え、開きたいレポートをタップします。

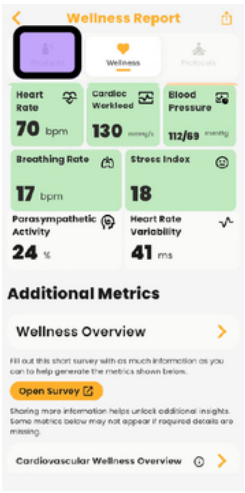

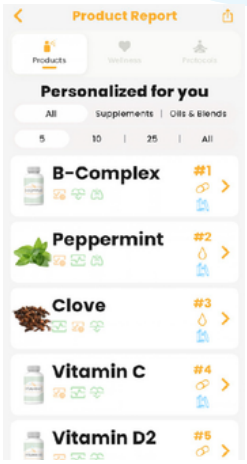

製品レポートの見方

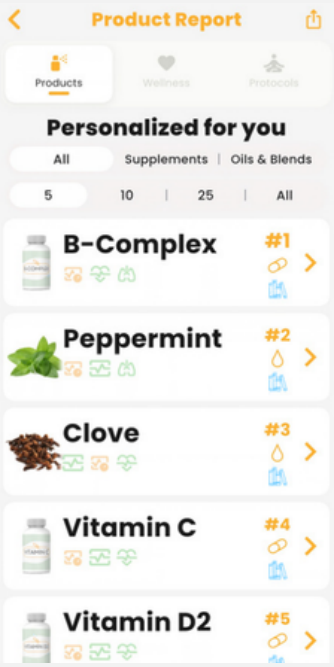

順位

順位が高いほど、その製品は加重されたウェルネス値によく合っています。1位が最も合っています。

指標アイコン


各製品に最も関係する3つの指標のアイコンが、製品名の下に表示されます。5つの主要指標カードのアイコンと同じです。


製品タイプの記号

製品がオイル、ブレンド、サプリメントのどれかを示します。

製品の詳細

製品をタップすると、詳しい情報のある製品に関する洞察ページが開きます。

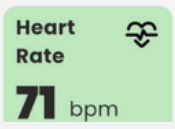

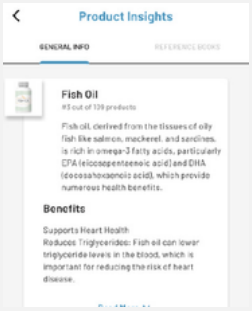


レポートの絞り込みと共有

レポートの絞り込み

上部のタブをタップして、製品タイプと製品数で絞り込みます。


標準表示

全タイプから5製品。

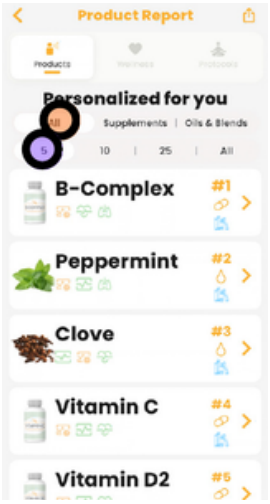


製品タイプを変える

すべて、サプリメント、オイル & ブレンド。

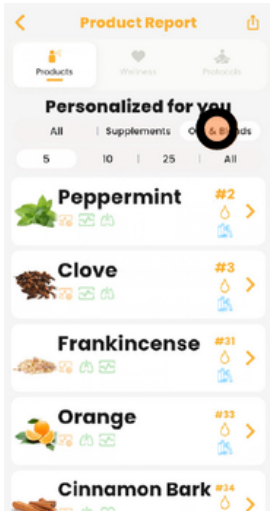

表示数を変える

5、10、25、Allを表示。

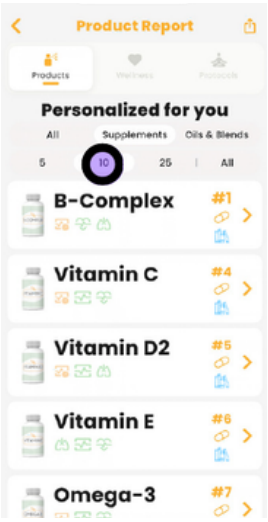


レポートの共有

レポート上部の共有記号をタップし、PDFかメールを選びます。



PDF

スマートフォンの共有オプションが開き、SMSやメール、ほかのアプリで送れます。スキャン値と製品レポートを含む複数ページのPDFです。

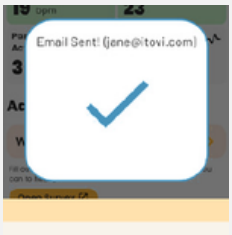

メール

製品レポートのコピーを、スキャンした人のメールアドレスに送ります。このメールはFace Scan終了時にも自動で送信されます。


注：このPDFには、ご依頼により作成された個人のウェルネス情報が含まれます。ダウンロードや共有後の保護はご自身の責任となります。メールやメッセージアプリなど、暗号化されない共有方法もあります。

プロトコルレポート

1 テーマを2つまで選ぶ


スキャンの前に重点テーマを2つまで選びます。迷ったら特になしを選び、顔スキャンに推奨をお任せください。

その後いつも通りスキャンします。結果が出たらレポートを開きます。右上の製品とウェルネスの横にプロトコルタブが表示されます。

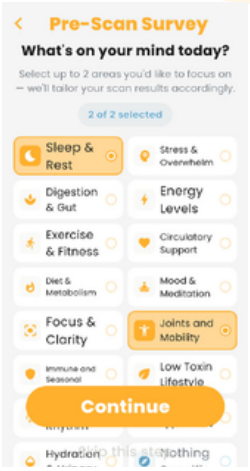


2 プロトコルタブを開く

今後30日間に合わせて選ばれた1〜3つのプロトコルが表示されます。各プロトコル名の下に、選ばれた製品数が表示されます。

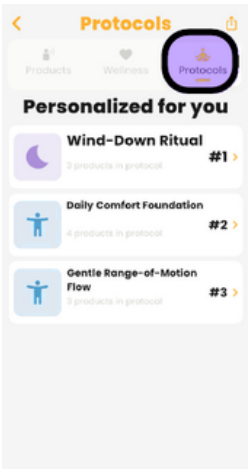

3 プロトコルを開く


プロトコルをタップすると、メリットと30日間のステップごとの手順が載ったページが開きます。もっと見るをタップすると全文を読めます。

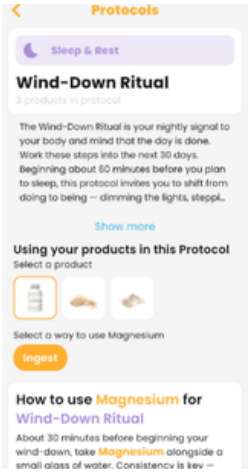

プロトコルの使い方


4 製品を選ぶ

各プロトコルページの下部、このプロトコルでの製品の使い方で製品の画像を選びます。

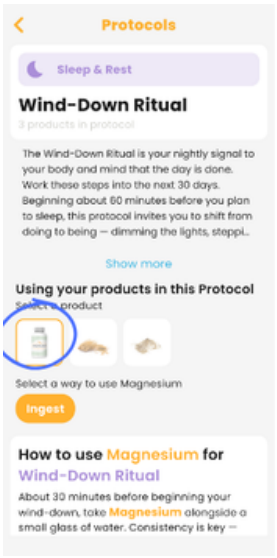


5 使い方を選ぶ


使い方のボタンで、摂取、拡散、塗布、一般、空気浄化 などを選びます。その製品に合う方法だけが表示されます。

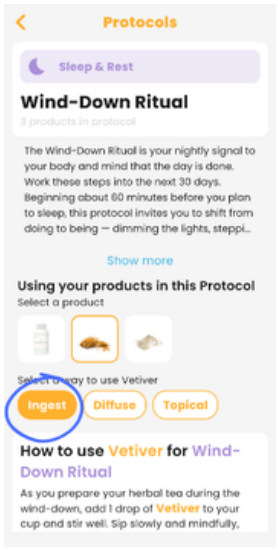

6 手順に従う

方法を選ぶとステップごとの手順が表示され、補完的な製品の提案もよくあります。

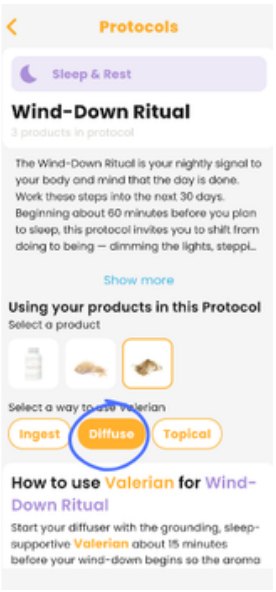

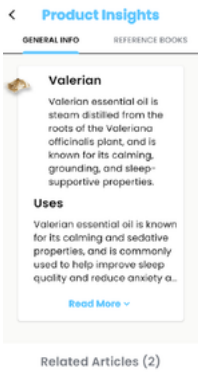

ヒント：製品名をタップすると、価格やリンク（ある場合）など詳細が見られます。

アドバイス

30日間、いろいろ試してみてください。製品や使い方を変えながら、ご自身とライフスタイルに合うものを見つけましょう。ウェルネスの歩みはあなたのもの。iTOVi プロトコルがその道のりをサポートします。

Copyright © 2018-2026 iTOVi, LLC

これらの製品は健康状態を示すものではなく、いかなる病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものでもありません。ご自身やほかの方の健康、iTOViの安全な使用、iTOViレポートの製品についてご質問がある場合は、医師または医療提供者にご相談ください。